

FOB5 SERIES

Powered by
Thema4lab®

Visible quality. Constant innovation. **Sichtbare Qualität. Stetige Innovation.**

FOB5 series floor cabinet steam sterilizers combine high-performance with the most advanced process technology.

The use of first-class quality materials specially developed for the pharma industry guarantees the highest safety standards and consumption savings.

These sterilizers have been specially designed with ergonomically features to easily handle the sterilization of large volumes.

FOB5 Stand-Autoklaven kombinieren beste Performance mit herausragender Prozesstechnologie.

Der Einsatz von hochwertigen Materialien, die speziell für den Betrieb in der Pharmaindustrie vorgesehen werden, garantiert die Konformität zu den höchsten Sicherheitsstandards und ermöglicht einen schonenden Medieneinsatz.

Diese Autoklaven sind speziell entwickelt worden, um mittels eines ergonomischen Designs auch große Mengen an Gütern einfach und mit wenig Aufwand zu sterilisieren.



The *smart* autoclave

- Thema4lab® process controller engineered and pre-validated by Fedegari according to GAMP 5
- Shortest batch times and optimum drying
- High efficient pre-heating/drying system guaranteed by the AISI 316 L stainless steel plate heat exchanger
- Full accessibility to technical area (frontal and lateral) for easy maintenance
- Single or double vertical automatic sliding doors
- Display on loading and unloading sides
- Vertical positioning of filters avoiding frequent rupture
- Horizontal positioning of vacuum pump
- Thema4lab® Prozesssteuerung entwickelt und vor-validiert durch Fedegari gemäß GAMP 5
- Kürzeste Prozesszeiten und optimale Trocknungsergebnisse
- Hocheffiziente Vorheizungs-/Trocknungssysteme durch integrierte Plattenwärmetauscher in AISI 316 L Edelstahl-Qualität
- Einfacher Zugang zum technischen Bereich (vorne und seitlich) garantiert einfache Wartung
- Ausgerüstet mit einer oder zwei (als Durchreichegerät) automatischen vertikalen Schiebetüren
- Mit Farbdisplay auf Be- und Entladeseite
- Abluftfilter sind stehend eingebaut um eine Beschädigung der Filterfläche durch Kondensat auszuschließen
- Vakuumpumpen sind gemäß Herstellervorschrift liegend eingebaut

INDUSTRIAL EXPERTISE CUSTOMIZED FOR YOUR LAB.

FOB5 SERIES


Powered by
Thema4lab®




Modulating valve on steam inlet
Modulares Ventil am Dampfeinlass



Condensate drain cooler and vacuum pump / Kondensatablaufkühler und Vakuumpumpe

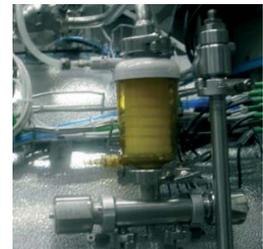

Decontamination of exhaust air with sterile filter / Dekontamination der Abluft über Sterilfilter

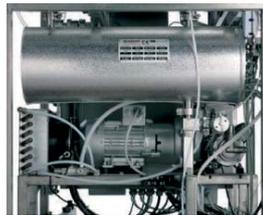

Separated steam generator with water booster pump / Separater Dampferzeuger mit Speisepumpe



Designed in Italy.

Made in Switzerland.

Technical Features	Technische Beschreibung	FOB5C-TS	FOB5-TS	FOB5S-TS	FOB5L-TS	FOB5SL-TS	FOB5XL-TS	FOB5SXL-TS
Chamber volume (liters)	Kammervolumen (Liter)	505	647	670	880	825	1050	980
Useful loading capacity (liters)	Nutzraum (Liter)	325	456	481	615	590	730	700
Doors	Türen	1	1	2	1	2	1	2
Chamber/door material	Kammer-/Türmaterial	316 L stainless steel, low roughness surface (Ra <0,6 µm) Edelstahl 316 L, niedrige Rauigkeit der Oberflächen (Ra <0,6 µm)						
Useful chamber dimensions (w x d x h) in mm	Nutzraumabmessungen (b x t x h) in mm	660 x 750 x 660	660 x 1055 x 660	660 x 1113 x 660	660 x 1423 x 660	660 x 1363 x 660	660 x 1685 x 660	660 x 1613 x 660
Empty weight (kg)	Leergewicht (kg)	830	850	950	950	1000	1050	1100
Overall dimensions (w x d x h) in mm	Außenabmessungen (b x t x h) in mm	1300 x 1198 x 1950	1330 x 1328 x 1950	1330 x 1409 x 1950	1330 x 1708 x 1950	1330 x 1659 x 1950	1330 x 1957,5 x 1950	1330 x 1909 x 1950
Max. operating pressure	Max. Betriebsüberdruck	3,5 bar (4 bar)*						
Max. operating temperature	Max. Betriebstemperatur	148 °C (152 °C)*						
Standard supply & power requirement	Stromversorgung	400 V / 50 Hz + N + PE 37 kW	400 V / 50 Hz + N + PE 37 kW	400 V / 50 Hz + N + PE 37 kW	400 V / 50 Hz + N + PE 41 kW	400 V / 50 Hz + N + PE 41 kW	400 V / 50 Hz + N + PE 49 kW	400 V / 50 Hz + N + PE 49 kW
Standards notified bodies	Normen/ Benannte Stellen	PED 97/23/EC - CE MARK - MDD (option)						

*HT versions / HT Versionen

Suggested kits/Empfohlene Ausstattung	Solid	Porous	Liquids (open)	Liquids (hermetically sealed)	Deco Filter	Deco Pathogen	Medical EN285	Food
Steam generator Dampferzeuger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vacuum pump Vakuumpumpe	▲	✓	○	○	✓	○	✓	✓
Internal air compressor Interner Kompressor für Druckluft	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Condensate cooling unit Kondensatkühler	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓
Fast cooling unit Aktive Schnellrückkühlung	○	○	✓	✓	○	✓	○	▲
Chamber pressure tightness test Kammerdruckdichtheitsprüfung	○	○	○	○	○	✓	○	○
Air-steam counterpressure cycle Dampf- Luftgemischverfahren mit Stützdruck	○	○	○	✓	X	○	○	▲
Safety thermal locking device Sicherheits-Türverriegelung	○	○	▲	✓	○	▲	○	▲
Decontamination cycle with discharge air filter Dekontaminationszyklus mit Keimfilter	○	○	○	X	✓	X	○	○
Decontamination cycle Dekontaminationszyklus	○	○	○	○	X	✓	○	○
F ₀ sterilization F ₀ -Wert-Sterilisation	○	○	○	○	○	○	○	✓
EN 285 conformity (vacuum pump, sterile air filter and external recorder) EN 285 Konformität (Vakuumeinrichtung, Sterilfilter und unabhängige Datenaufzeichnung)	○	○	○	○	○	○	✓	○
Additional PT100 probe Zusätzlicher Medienfühler PT100	○	○	▲	▲	▲	▲	○	▲
Process printer Prozess-Drucker	○	○	○	○	○	○	✓	○
Slow vacuum Langsames Vakuum	○	○	○	○	○	○	○	✓
Standard packing Standard-Verpackung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

X - not available/nicht verfügbar ✓ - included/enthalten ○ - optional ▲ - recommended/empfohlen

All models can be configured using a wide range of process and software options and an extensive choice of accessories. The basic version of the sterilizers is very easy to configure, thanks to its conceptual design and modular construction, with exclusive optional kits. FDA CFR 21 Part 11 and CFPP 01-01 conformity kits are available on demand.

Alle Gerätemodelle können mit den verschiedensten Software- und Prozess-Optionen sowie Zubehör ausgerüstet werden. Nach der ersten Auswahl des benötigten Basismodells dieses Sterilisators ist es dank des modularen Aufbaus anschließend sehr einfach, weitere exklusive Optionen für den kundenspezifischen Betriebseinsatz hinzuzufügen. Eine Ausrüstung mit FDA CFR 21 part 11-Konformität sowie Kits für den Einsatz gemäß CFPP 01-01 sind auf Wunsch verfügbar.

Deutschland
Fedegari GmbH
Lehrer-Götz-Weg, 11
81825 München
T +49 89 42044920
F +49 89 42044918
info@de.fedegari.com

Schweiz
Fedegari (Suisse) SA
Via alla Gerra, 11
6930 Bedano
T +41 91 9352090
F +41 91 9352099
info@fedegarisuisse.ch

Italia
Fedegari Autoclavi SpA
SS 235 km 8
27010 Albuzzano (PV)
T +39 0382 434111
F +39 0382 434150
sales@fedegari.com

FEDEGARI
LAB DIVISION

www.fedegari.com